


Semplicemente geniali!


- > Questi cuscini consentono una **distribuzione uniforme** del calore e del freddo.
- > Sono prodotti con **materiali naturali al 100 %** e sono biodegradabili.
- > **Non vi è alcun pericolo di bruciatura o congelamento** delle parti di pelle da trattare. Per questo i cuscini sono **molto adatti anche ai bambini**.
- > **L'elevata morbidezza permane** anche quando il cuscino è congelato.
- > Sono **prodotti naturali**, che si impongono per la loro geniale semplicità.
- > I prodotti **durano per molti anni**.

L'effetto

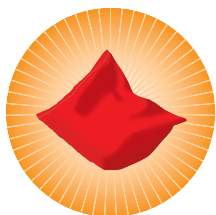

Se applicato caldo: introdurre il cuscino per 10 minuti nel forno preriscaldato a 100 gradi, sfruttare il calore residuo o ppure riscaldarlo per 2-3 minuti nel microonde.

Ha un effetto rilassante in caso di: tensioni > dolori cervicali > mal di schiena > crampi addominali > nervosismo e stress > disturbi del sonno > dolori mestruali > cefalee da tensione > colpo della strega/sciatalgia

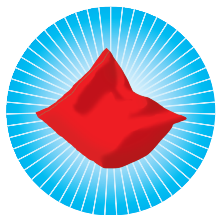

Se applicato freddo: introdurre il cuscino per 45 minuti nel congelatore.

Ha un effetto rilassante in caso di: emicrania > vene varicose > punture di insetti > infiammazioni > stiramenti / distorsioni > contusioni > gonfiore > mal di denti

Le possibilità

I nostri cuscini sono disponibili anche come cuscini cervicali, contenitori termici per bottiglie, animali di lana, scaldapiedi e molto altro ancora! Ordinateli tramite l'**Online-Shop**, www.kirschensteine.ch oppure chiamate semplicemente: **056 444 91 08**

L'idea regalo pubblicitaria per la vostra azienda

I nostri cuscini utili e naturali hanno molto successo anche con logo stampato come regalo per i clienti unico nel suo genere. L'età delle penne a sfera è passata! > L'effetto nel lungo periodo è garantito. **Chiamateci, saremo lieti di fornirvi una consulenza.**





Meyer Naturprodukte AG > Mühle 18 > CH-5246 Scherz > Tel. 056 444 91 08
Fax 056 444 91 07 > info@kirschensteine.ch > www.kirschensteine.ch

APPLICAZIONI

Naturali e semplicemente geniali!

Cuscini ai noccioli di ciliegie

Cuscini ai noccioli d'uva

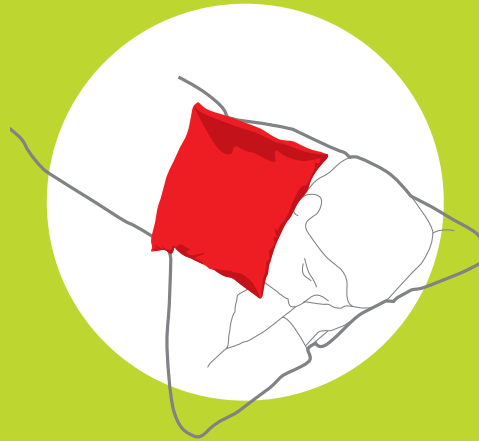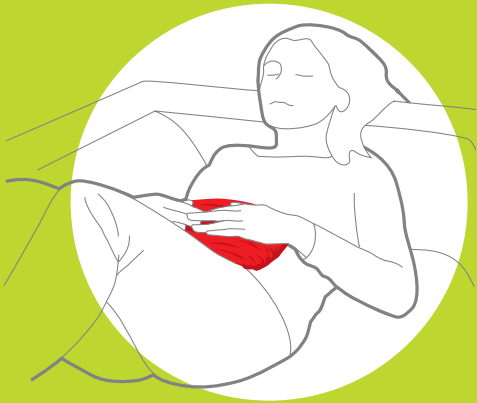

Dolori della colonna vertebrale

Luogo di applicazione > zona sacrale

Indicazioni terapeutiche > tensioni muscolari e dolori nella zona sacrale

Obiettivo della terapia > rilassamento della muscolatura e alleviamento dei dolori

Metodo di trattamento > applicare il cuscino ai noccioli di ciliegie caldo, da 1 a 3 volte al giorno, per 10 minuti in posizione comoda e rilassata supina o addominale.

Cefalee ed emicranie acute

Luogo di applicazione > sulla fronte

Indicazioni terapeutiche > cefalee ed emicranie con dolore martellante

Metodo di trattamento > applicare il cuscino ai noccioli di ciliegie freddo per 5 minuti mettendolo sulla fronte in posizione supina. È consigliato rimanere in un locale fresco e semibuio per ca. 15 – 30 minuti. È possibile ripetere più volte l'applicazione. In caso di dolore martellante persistente (per più di un'ora) è consigliabile il ricorso ad altre misure terapeutiche o diagnostiche.

Crampi addominali

Luogo dell'applicazione > regione addominale

Indicazioni terapeutiche > crampi addominali in assenza di febbre e vomito

Metodo di trattamento > applicare il cuscino ai noccioli di ciliegie caldo, da 1 a 3 volte al giorno, per 10 minuti sulla pancia in posizione comoda, semiseduta e rilassata con le gambe piegate verso l'addome. Per il trattamento di neonati o bambini piccoli è consigliato un periodo d'applicazione massimo di 5 minuti. È possibile ripetere più volte l'applicazione. In caso di crampi persistenti, diarrea, vomito e attacchi febbrili si consiglia di chiamare assolutamente un medico!

Distorsioni e contusioni

Luogo di applicazione > parte del corpo lesa

Indicazioni terapeutiche > lesioni tipo distorsioni, contusioni e strappi muscolari, nella fase acuta (da 0 a 3 giorni)

Obiettivo della terapia > diminuzione del dolore, evitare il gonfiore delle parti molli

Metodo di trattamento > applicare il cuscino ai noccioli di ciliegie freddo per 10 minuti. Ripetere l'applicazione in caso di forte gonfiore. Si consiglia di tenere contemporaneamente la parte interessata in posizione elevata e immobilizzata.

Tensioni della zona cervicale

Luogo di applicazione > zona cervicale e muscoli adiacenti

Indicazioni terapeutiche > tensioni muscolari in caso di sovraccarico e postura errata

Obiettivo della terapia > rilassare e allentare la muscolatura

Metodo di trattamento > applicare il cuscino ai noccioli di ciliegie caldo, da 1 a 3 volte al giorno per 10 minuti in posizione comoda e rilassata.

Importante

I cuscini ai noccioli di ciliegie e quelli ai noccioli d'uva sono prodotti puramente naturali. Tenuti in luoghi inadatti possono contaminarsi facilmente con dei microrganismi.

> Conservateli perciò in un luogo fresco e asciutto. Pulite i cuscini di tanto in tanto riscaldandoli per 3 minuti nel forno a microonde oppure per 15 minuti nel forno preriscaldato a 100° C.

I nostri cuscini ai noccioli di ciliegie sono disponibili anche come cuscini cervicali, contenitori termici per bottiglie, animali di lana, scaldapiedi e molto altro ancora!