

einfach genial!


- > Die Kissen bieten **gleichmässige Verteilung** der Wärme und Kälte.
- > Sie sind hergestellt aus **100% natürlichen Materialien** und sind kompostierbar.
- > Es besteht **keine Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr** der zu behandelnden Hautstellen. Daher sind die Kissen auch **für Kinder sehr gut geeignet**.
- > Die **hohe Anschließbarkeit** bleibt auch in gefrorenem Zustand erhalten.
- > Es sind **natürliche Produkte**, die von der genialen Einfachheit leben.
- > Die Produkte **bleiben jahrelang erhalten**.

die Wirkung



Warm-Anwendung: Kissen 10 Minuten in den 100 Grad heissen Backofen legen, Restwärme nutzen oder kurz in der Mikrowelle wärmen: 1-2 Minuten für 1 kg Kissen, kleinere weniger lang.

Wirkt entspannend bei: Verspannungen > Nackenschmerzen > Rückenschmerzen > Bauchkrämpfen > Nervosität und Stress > Schlafstörungen > Menstruationsschmerzen > Spannungskopfschmerzen > Hexenschuss/Ischias

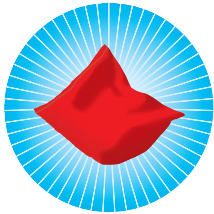

Kalt-Anwendung: Kissen 45 Minuten in den Tiefkühler legen.

Wirkt entspannend bei: Migräne > Krampfadern > Insektenstichen > Entzündungen > Zerrungen / Verstauchungen > Prellungen > Schwellungen > Zahnschmerzen

die Möglichkeiten

Unsere Kissen gibt es auch als Nackenkissen, Flaschenkühler, Wolltiere, Fusswärmer und vieles mehr! Bestellen Sie via **Online-Shop, www.kirschensteine.ch** oder rufen Sie uns einfach an: **Meyer Naturprodukte AG, 056 444 91 08**



Meyer Naturprodukte AG > Mühle 18 > CH-5246 Scherz > Tel. 056 444 91 08
Fax 056 444 91 07 > info@kirschensteine.ch > www.kirschensteine.ch

ANWENDUNGEN



Natürlich und einfach genial!

Kirschensteinkissen

Traubenkernkissen



www.kirschensteine.ch

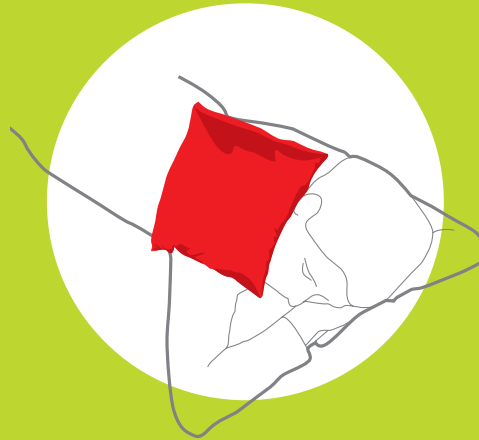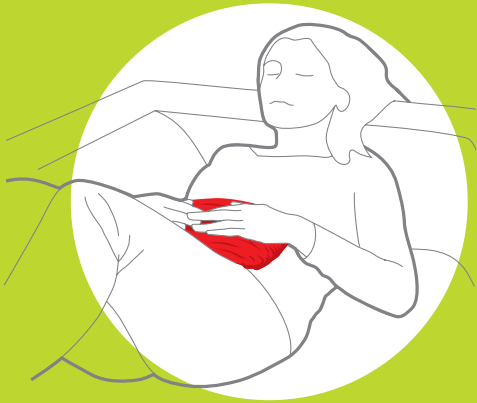

Rückenschmerzen

Behandlungsort > Kreuzregion
Behandlungsgrund > muskuläre Verspannungszustände, tiefsitzende Kreuzschmerzen
Behandlungsziel > Lockerung, Schmerzlinderung
Behandlungsmethode > Anwendung mit erwärmtem Kissen 1 bis 3 Mal täglich während 10 Minuten in entspannter und bequemer Bauch- oder Rückenlage.

Akute Kopfschmerzen

Behandlungsort > Stirnregion
Behandlungsgrund > pochende Kopfschmerzen
Behandlungsmethode > Anwendung mit gekühltem Kissen während 5 Minuten durch Auflegen auf die Stirn in liegender Position. Gleichzeitige entspannende Lagerung in kühlem, verdunkeltem Raum für 15 bis 30 Minuten empfohlen. Mehrmalige Wiederholungen sind möglich. Bei länger andauernden, stark pochenden Kopfschmerzen (über 1 Stunde) sind zusätzliche Abklärungs- und Therapiemaßnahmen empfohlen.

Bauchkrämpfe

Behandlungsort > Bauchregion
Behandlungsgrund > krampfartige Bauchschmerzen ohne Fieber und Erbrechen
Behandlungsmethode > Anwendung mit erwärmtem Kissen während 10 Minuten durch Auflegen auf den Bauch, in bequemer halbsitzender Position mit angezogenen Beinen. Bei Säuglingen und Kindern bis 8 Jahre ist eine verkürzte Behandlungszeit (5 min.) empfohlen. Mehrmalige Wiederholungen sind möglich. Bei länger andauernden Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen und Fieberschüben ist eine ärztliche Abklärung dringend empfohlen.

Verstauchungen und Prellungen

Behandlungsort > betroffene Körperregion
Behandlungsgrund > Verletzungen wie Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen in der akuten Phase (0 bis 3 Tage)
Behandlungsziel > Schmerzlinderung, Verminderung der Weichteilschwellung
Behandlungsmethode > Anwendung mit gekühltem Kissen während 10 Minuten. Wiederholte Anwendung bei starken Schwellungen empfohlen. Gleichzeitige Hochlagerung und Ruhigstellung empfohlen.

Nackenverspannungen

Behandlungsort > Nacken und Schultergürtelregion
Behandlungsgrund > muskuläre Verspannungszustände bei Fehl- und Überbelastung
Behandlungsziel > Lockerung, Entspannung
Behandlungsmethode > Anwendung mit erwärmtem Kissen 1 bis 3 Mal täglich, während 10 Minuten in entspannter und bequemer Körperposition.

Wichtig

Kirschensteinkissen und Traubenkernkissen sind reine Naturprodukte! Bei unsachgemäßer Lagerung kann es zu einer Verunreinigung mit Mikroorganismen kommen.
> Lagern Sie die Kissen an einem kühlen und trockenen Ort. Reinigen Sie die Kissen von Zeit zu Zeit mittels Erhitzung, 15 Minuten im 100 Grad heißen Backofen.

Unsere Kissen gibt es auch als Nackenkissen, Flaschenkühler, Wolltiere, Fusswärmer und vieles mehr!